



OGAWA

MYsofaLuxe

Massage Sofa



Rev.1.0

Gebruikershandleiding



OGAWA

MYsofaLuxe

Uitgebreide Massage Sofa

Gebruikershandleiding
Alle informatie is correct op het moment van afdrukken

Inhoud

Voor gebruik

Belangrijke veiligheidsinstructies.....	NL1
-Grondingsinstructies.....	NL5
• Product onderdelen.....	NL6
● Installatie stap.....	NL8
-Instellen van de massagestoel.....	NL9
-Voor gebruik.....	NL 10

Hoe te gebruiken

● Bedieningsinstructie	NL 13
-Na de massage	NL17

Onderhoud



-Reiniging en onderhoud.....	NL	18
------------------------------	----	----

V&A/Belangrijke opmerkingen

-VRAAG & ANTWOORD.....	NL	19
< Problemen oplossen.....	NL	20
-Specificatie.....	NL	22
-Contact.....	NL	23


Belangrijke veiligheidsinstructies Moet worden gevolgd

Deze veiligheidsinstructies moeten tijdens het gebruik strikt worden om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen: W Alle veiligheidsinstructies worden beschreven in overeenstemming met gradaties van het letsel of schade als gevolg van verkeerd gebruik.

 Waarschuwen	Acties die ernstig letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben
 Let op	Acties die lichte verwondingen of materiële schade veroorzaken




W Let op de symbolen vóór de veiligheidsinstructies (hieronder vindt u een voorbeeld).


Handelingen die absoluut verboden moeten worden	(Acties die moeten worden uitgevoerd
---	---	-------------------------------------

 Waarschuwing




Moet worden gevolgd	<ul style="list-style-type: none"> ● Voordat u het product gebruikt, moeten personen die worden behandeld of een van de volgende symptomen hebben een arts raadplegen. <ul style="list-style-type: none"> (1) Personen met een pacemaker of een ander in-vivo elektronische storing; (2) Patiënten met kwaadaardige tumoren; (3) Patiënten met hartaandoeningen; (4) Personen bleken niet in staat om temperaturen; (5) Zwangere personen of vrouwen die net zijn bevallen bevalling; (6) (11) Personen met een abnormale of verbogen wervel; diabetes of een andere ernstige perifere circulatiestoornis; (12) Personen met een uitstulping van de tussenwervelschijf; schijf; (7) (13) Personen die zich erg ongemakkelijk voelen of personen met acute pijnlijke aandoeningen zoals (met uitzondering van de omstandigheden hierboven) verstuikingen of spierverrekkingen; Anders kunnen er ongelukken of lichamelijke ongemakken gebeuren. ● Als je je lichamelijk abnormaal voelt tijdens het gebruik of geen effect voelt na gebruik, stop dan onmiddellijk met het product en raadpleeg een arts. Anders kunnen er ongelukken of lichamelijke ongemakken gebeuren. ● Voordat u gemasseerd wordt of de rugleuning of het massageonderdeel onderbenen/voeten verplaatst, moet ervoor zorgen dat er zich geen persoon of huisdier in de buurt van het product bevindt (voor, achter, onder of aan de zijkant). ● Controleer voor gebruik of er geen vreemde voorwerpen tussen de rugleuning en de rugbekleding zitten. Anders kunnen er ongelukken of lichamelijke ongemakken gebeuren. <p>" Til voor gebruik het rugkussen op en controleer of de stof van de loopsecties van de massagewielen of van andere posities beschadigd is. (Zelfs als de stof licht beschadigd is, moet u het product onmiddellijk stoppen, de stekker uit het stopcontact trekken en het product opsturen voor reparatie). Als het product wordt gebruikt wanneer de stof beschadigd is, kunt u letsel oplopen of een elektrische schok krijgen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Masseer niet langer dan 30 minuten per keer. ● Masseer een enkel deel niet langer dan 5 minuten. Als een van deze veiligheidsinstructies niet wordt opgevolgd, kunt u een nadelig effect ondervinden en letsel oplopen. ● Zet na elk gebruik de aan/uit-schakelaar in de stand 'o' en trek de stekker uit het stopcontact. en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact. Anders kunnen er ongelukken of verwondingen gebeuren door ondeugend gedrag van kinderen. ● Volg de voorschriften voor het gebruik van het stopcontact en de bedrading/apparaatuur. ● Gebruik een 220-240V- 50/60Hz voeding. Anders kan er brand ontstaan door slechte isolatie als gevolg van bijvoorbeeld vocht. (Veeg de stekker af met een droge doek.) ■ Anders elektrische schokken, productdefecten of brand door oververhitting optreden. Verwijder vuil zoals stof op de stekker.
	<ul style="list-style-type: none"> (8) Personen met letsel in de gemasseerde delen; (9) Personen met een lichaamstemperatuur hoger dan 38 °C (met koorts) (Bijvoorbeeld, personen met intense acute ontsteking symptomen zoals lusteloosheid, koude rillingen en verandering van bloeddruk of Personen met een zwakke gezondheid); (10) Personen die onwel zijn of moeten rusten;

Waarschuwing

Moet zijn gevolgd door	<ul style="list-style-type: none"> ● Stop het product onmiddellijk en trek de stekker uit het stopcontact in geval afwijkingen of storingen om rook, brand en elektrische schokken te voorkomen. Afwijking en foutvoorbeelden <ul style="list-style-type: none"> • Het product werkt niet meer nadat de stroomschakelaar in de stand ON is gezet; • Nadat de voedingskabel is verplaatst, wordt het product onderbroken ingeschakeld; • Tijdens het gebruik verspreidt het product een brandgeur of een abnormaal geluid; • Het product is vervormd of verwarmt abnormaal; • Laat het product bij een van deze afwijkingen of storingen onmiddellijk inspecteren en repareren door een erkend servicecentrum.
 Verboden	<ul style="list-style-type: none"> ● Plaats het rugkussen niet tussen de rugleuning en de rugbekleding. Anders kunnen er productfouten optreden. ● Houd bij het hanteren van het product het frame vast. Anders kunnen er productdefecten optreden of kan er persoonlijk letsel ontstaan. ● De volgende personen mogen het product niet gebruiken. Personen voor wie massage verboden is door artsen, zoals personen met trombose, ernstige aneurysma, acuut veneus aneurysma, diverse huidontstekingen (zoals onderhuidse weefselontsteking) of diverse huidinfecties. Anders kunnen ziekten erger worden. ● De volgende personen mogen hun middel niet masseren. <ul style="list-style-type: none"> • Personen met acute lumbago, protrusie van een tussenwervelschijf of verplaatsing van een lendenwervel; • Personen met vervorming of andere ongemakken van het heupgewricht; Anders kunnen ziekten erger worden. ● Steek geen handen, armen of voeten in de stoffen van de rugleuning of in de delen van de massagewielen. ● Kinderen mogen het product niet gebruiken. Zorg dat ze niet op het product spelen of op het massageonderdeel voor benen/voeten, de zitting, de rugleuning of de arMLEUNINGEN klimmen. ● Klim niet op de rugleuning of arMLEUNINGEN. ● Leun of zit niet op de rugleuning. ● Houd uw hoofd uit de buurt van bereikbare delen van de rugleuning en de rugbekleding. ● Personen die zich niet duidelijk kunnen uitdrukken of het product niet bedienen, mogen het product niet gebruiken. • Let bij het masseren van de nek op de bewegingsrichting van de massagewielen en doe het volgende masseer niet met een te grote kracht en masseer het voorste deel van de nek niet. Anders kunnen er ongelukken of persoonlijke verwondingen gebeuren. ● Beschadig de voedingskabel of de stekker niet. (De voedingskabel of stekker niet beschadigen, bewerken, geforceerd buigen, verdraaien of verlengen, of de of stekker dicht bij een verwarming plaatsen, of zware voorwerpen op de voedingskabel of stekker binden of vastbinden). Een beschadigde voedingskabel of stekker kan elektrische schokken, kortsluiting of brand veroorzaken. Raadpleeg de winkel waar u het product hebt gekocht of een erkend servicecentrum over de onderhoudsmethode van de voedingskabel of de stekker.
 Verboden met natte handen	<ul style="list-style-type: none"> ● Steek de stekker niet in het en trek deze er niet uit met natte handen. Dit kan elektrische schokken veroorzaken.
 Demontage verboden	<ul style="list-style-type: none"> ● Monteer, demonteer of repareer het product niet zonder toestemming. Anders kunnen brand, abnormale bewegingen of persoonlijk letsel ontstaan.

	 Let op
Moet worden gevolgd	<ul style="list-style-type: none"> De volgende personen (zelfs als ze op dit moment lichamenlijk gezond zijn) moeten een arts raadplegen voordat ze het product gebruiken. <ol style="list-style-type: none"> Personen met spieratrofie door veroudering of magere personen; Personen met spit als gevolg van bot- of visusproblemen; Personen die de neiging hebben om verstuingen of kneuzingen op te lopen; Personen met wagen- of zeeziekte of een sterke reactie bij gebruik van andere transportmiddelen; Personen die ooit een hartoperatie of een andere viscerale operatie hebben ondergaan; de gezondheid kan anders verslechteren.
	<ul style="list-style-type: none"> Controleer voordat je op het product gaat zitten of er geen vreemde stoffen tussen twee delen zitten. (Controleer of er zich geen vreemde voorwerpen bevinden op de rugbekleding, de rugleuning, zitting, het onderste been-/voetmassagegedeelte of de binnenkant van het rugkussen). Anders kunnen er ongelukken, verwondingen of productdefecten gebeuren doordat handen, voeten of andere voorwerpen door het product worden vastgeklemd.
	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik het product niet als u een hard siervoorwerp op uw hoofd draagt (zoals een haarspeld). Als er een hard voorwerp (zoals een mobiele telefoon of een sleutel) in een broekzak zit, haal het er dan uit voordat je gaat masseren.
	<ul style="list-style-type: none"> Controleer voordat je op de stoel gaat zitten of de massagewielen in de ingetrokken posities staan. Als je tijdens de massage de stoel wilt verlaten, stop dan eerst het product. Anders kunnen er ongelukken of verwondingen gebeuren. Als u de stekker uit het stopcontact trekt, trek dan niet aan de voedingskabel maar houd de stekker vast. Anders kan er een elektrische schok of kortsluiting ontstaan. Voordat u het product verplaatst, zet u het onderste been-/voetmassagegedeelte terug in de oorspronkelijke positie door de hoek aan te passen. Anders kan er letsel ontstaan.
	<ul style="list-style-type: none"> Als u het product met katrollen verplaatst, leg dan voorwerpen zoals matten op de vloer. Anders kunnen er sporen op de vloer achterblijven.
	<ul style="list-style-type: none"> Verwijder obstakels in de buurt van het product voordat u het met katrollen verplaatst. Til het zitvlak van het onderste been-/voetmassagegedeelte op naar een positie die iets lager is dan het middel en verplaats het product langzaam. Anders kunnen er ongelukken of verwondingen gebeuren door de omloopsnelheid van het product.
	<ul style="list-style-type: none"> Plaats het product horizontaal tijdens gebruik. Anders kunnen er ongelukken gebeuren door het omkeren van het product. Als er symptomen optreden zoals huidontsteking, jeuk of zwelling bij gebruik, stop dan onmiddellijk met het product en raadpleeg een arts. Anders kunnen er ongelukken of lichamelijke ongemakken gebeuren.
	<ul style="list-style-type: none"> Als het product opnieuw wordt gebruikt voor massage na een periode van buiten gebruik te zijn geweest, lees dan de gebruiksaanwijzing opnieuw en controleer eerst of het product normaal kan werken. Anders kunnen er ongelukken of verwondingen gebeuren.
	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik het product niet samen met andere apparaten. Anders kunnen er ongelukken of lichamelijke ongemakken gebeuren.
	Verboden
<ul style="list-style-type: none"> Val niet in slaap tijdens het gebruik van het product. Gebruik het product niet na het drinken. Als de lucht in de vulling van de airbag op de stoel niet volledig wordt afgevoerd, ga dan niet op de stoel staan, spring er niet op en leg er geen dingen op. Anders kunnen er ongelukken of verwondingen gebeuren. 	

⚠ Let op

	<ul style="list-style-type: none"> ● Plaats geen handen of voeten tussen het product en het massagedeel voor onderbenen/voeten. ● Steek geen handen, armen of hoofd in de naad van het massageonderbeen/voetgedeelte (voetsteun). Laat voor de zekerheid het gedeelte Massage van onderbenen/voeten toe na de massage. ● Steek geen handen, voeten of hoofd tussen de rugleuning en de rugbekleding. ● Plaats geen huisdieren op het product (zoals de rugbekleding, rugleuning en armleuning). ● Trek de stekker niet uit contact en zet de stroomschakelaar niet plotseling uit tijdens het masseren. Anders kunt u letsel oplopen.
	<ul style="list-style-type: none"> — Ga niet op de achterkant staan of zitten. — Anders kan het product omvallen en persoonlijk letsel veroorzaken.
	<ul style="list-style-type: none"> — Ga niet op de armleuningen staan of zitten. — Anders kan persoonlijk letsel ontstaan.
6 Verboden	<ul style="list-style-type: none"> — Ga niet staan of zitten op het onderste been-/voetmassagegedeelte of de voetsteun. Anders kunnen er ongelukken of verwondingen gebeuren door het draaien van de voorkant van de voetsteun of door het omvallen van het product. — Als de onderkant van het onderste been-/voetmassagegedeelte in de vloer loopt, kan de vloer beschadigd raken.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Sleep of duw het product niet nadat het geïnstalleerd is. Anders kan de vloer beschadigd raken.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Verplaats het product niet als een persoon op staat. ● Gebruik het product niet op een plek waar verwarmingselementen of elektrische producten zijn. Anders kan er brand ontstaan.
 Contact met natte handen verboden	<ul style="list-style-type: none"> ● Gebruik het product niet in een badkamer of op een andere natte plek. Anders kunnen er elektrische schokken of defecten optreden.
 Product bevochtiging verboden	<ul style="list-style-type: none"> ● Sprengel geen stoffen zoals water op het product of de afstandsbediening. Anders kunnen elektrische schokken, kortsluiting of productstoringen optreden.
 Pull out de g-stekker	<ul style="list-style-type: none"> — Trek eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het product reinigt of onderhoudt. Anders kunt u elektrische schokken krijgen of letsel oplopen. — Trek bij een stroomstoring onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Anders kunnen er ongevallen of verwondingen gebeuren wanneer de stroomtoevoer wordt hersteld. — Trek de stekker uit het stopcontact als het product niet wordt gebruikt. Anders kan er brand ontstaan door elektrische lekkage als gevolg van veroudering van de isolatie door stof en vocht.

AARDING

A

Het product moet worden geaard om het gevaar van elektrische schokken als gevolg van functionele fouten van het product.

- * Het product heeft een voedingskabel met een aardingsgeleider en een aardingsstekker. De aardingsstekker moet in een geschikt stopcontact worden gestoken dat correct is geïnstalleerd en geaard in volledige overeenstemming met de plaatselijke voorschriften en regelgeving


A Let op

- Als de aardgeleider niet correct is aangesloten, kan dit elektrische schokken veroorzaken. Als u niet zeker weet of de aarding correct is, laat deze dan controleren door een professionele elektricien. Zelfs als de stekker die bij het product is geleverd niet overeenkomt met het stopcontact dat u hebt, mag u deze niet openmaken. Het is aan te raden om een professionele elektricien te raadplegen om een geschikt stopcontact te laten installeren.
- Het product heeft een geaarde stekker. Zorg ervoor dat het product is aangesloten op een stopcontact dat overeenkomt met de aardingsstekker.
- Sluit het product niet aan op een multistekker.
- Als de stekker beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciale stekker die verkrijgbaar is bij OGAWA of

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen.


beperkte gebruikers of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Het apparaat heeft een verwarmd oppervlak. Personen die ongevoelig zijn voor warmte moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van het apparaat. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.

Product Onderdelen

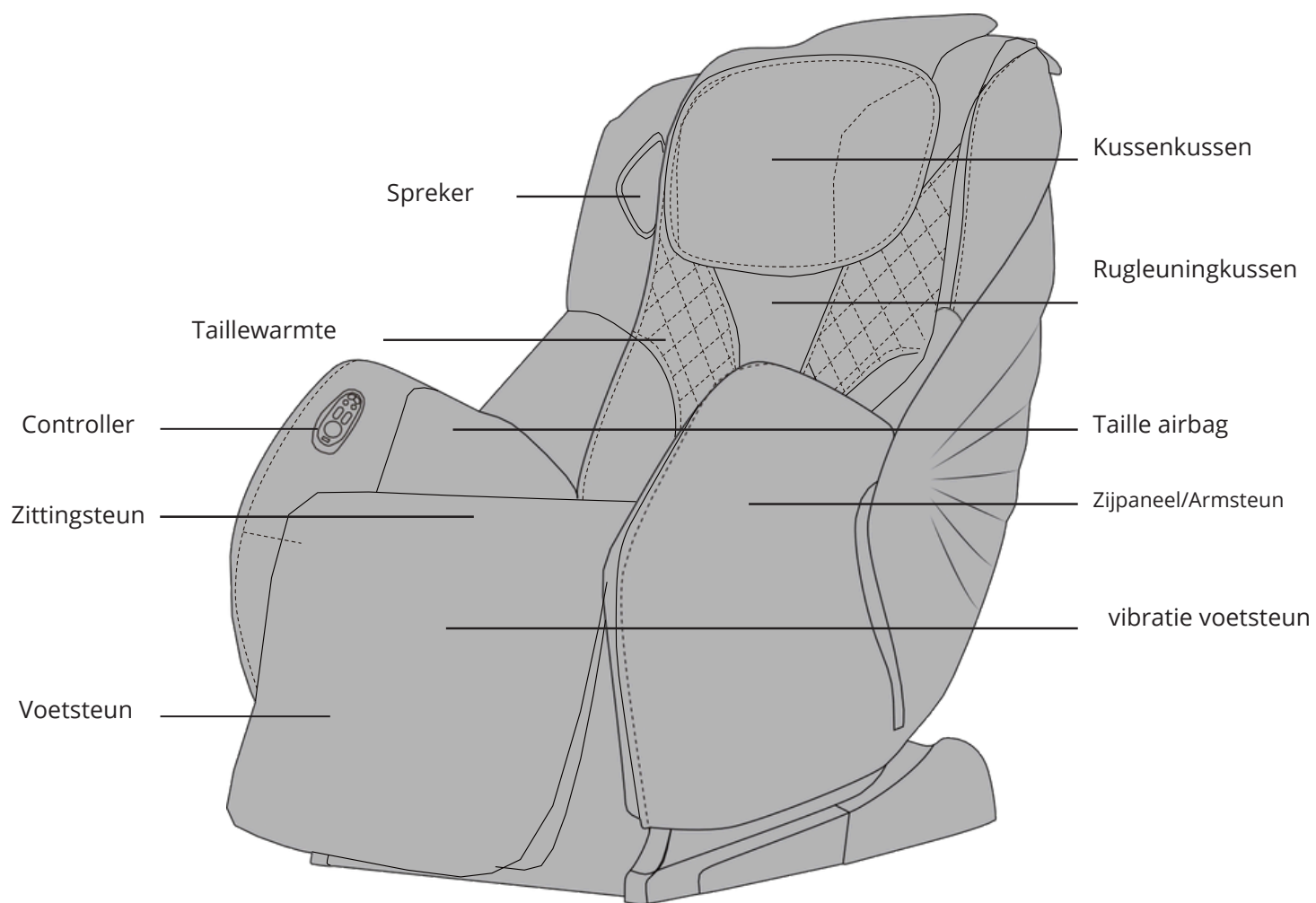

Product Onderdelen

Airbags Massage Positie

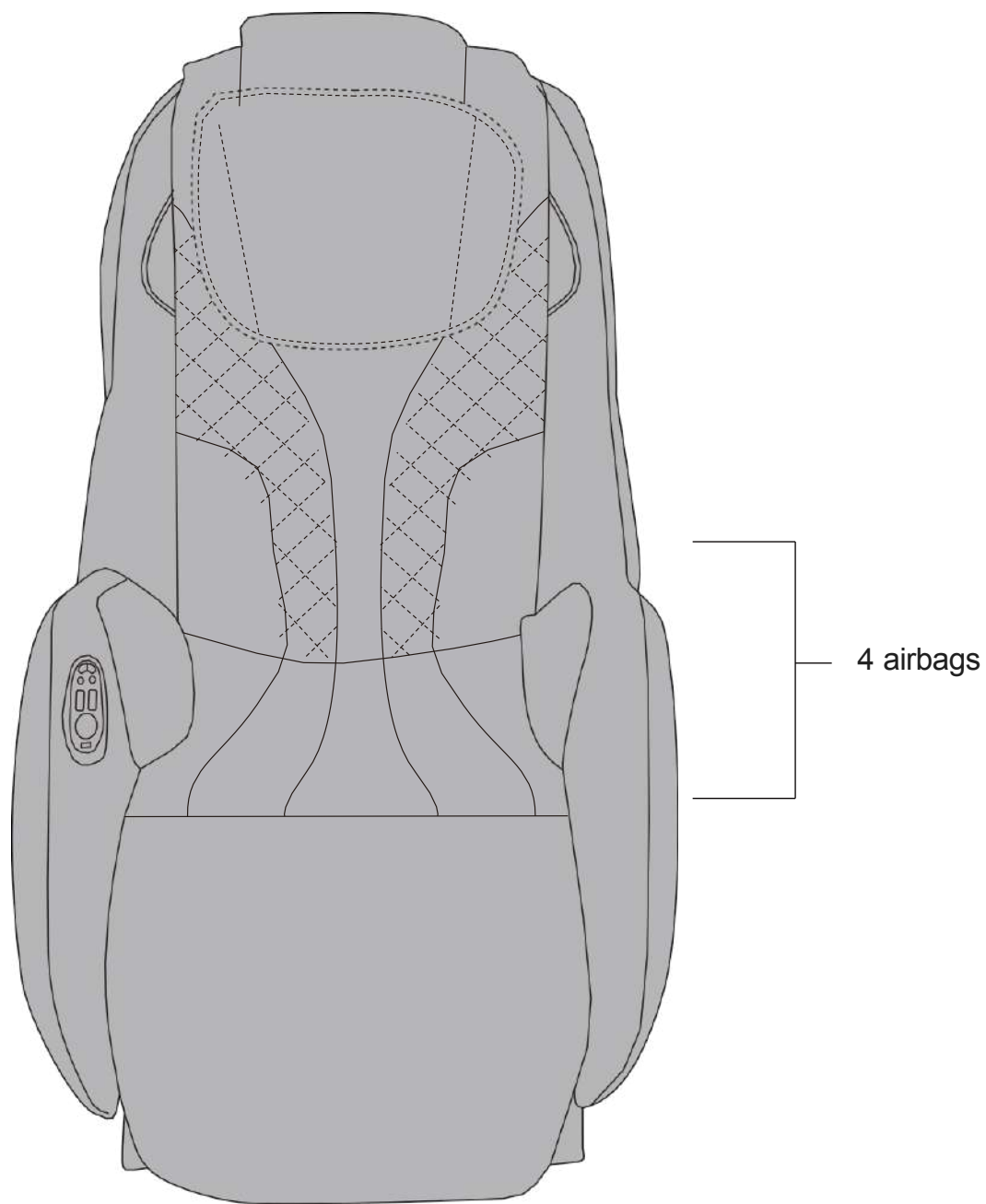


NL 7

Installatie stap


1. Na het uitpakken staat de massagestoel in Figuur 1. Plaats het frame van de poten a en de bekleding van beenleer B langzaam naar beneden, zoals getoond in Figuur 2.
2. Haal het netsnoer eruit en steek het in een geschikt stopcontact. Nadat de stroom is ingeschakeld, wordt de stoel gereset.
3. Als de stoel in de staat, worden achtereenvolgens het klittenband voor de onderbenen lederen band B1 & B2 en het klittenband voor het onderbeenframe A1 & A2 vastgezet, zoals getoond in Figuur 3.

Caution



- Zorg er bij het installeren van de massagestoel voor dat er aan de voor- en achterkant minstens 6 cm ruimte overblijft, zodat de rugleuning en voeten vrij kunnen kantelen.
- Installeer de massagestoel volgens de onderstaande stappen. Steek de stekker pas in het stopcontact als deze volledig geïnstalleerd is.

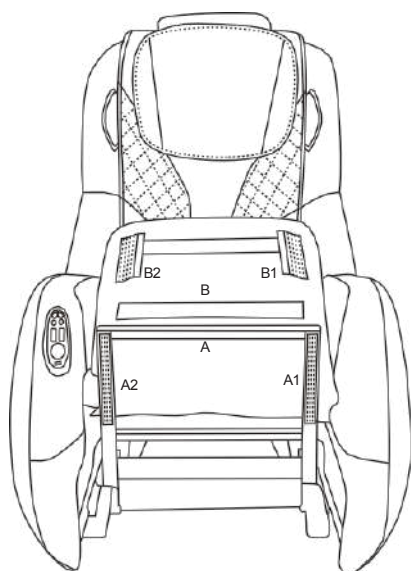

Afbeelding 1

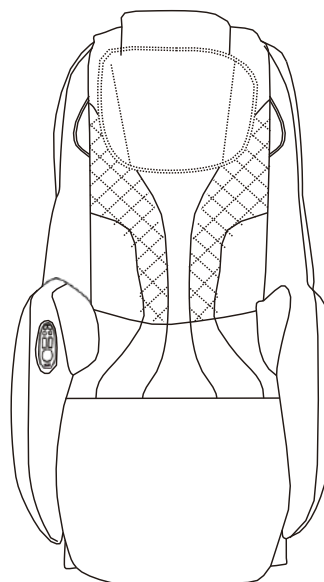

Figuur 2

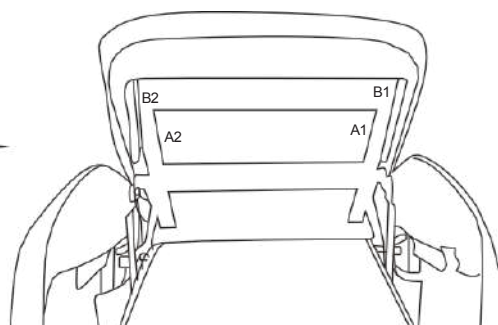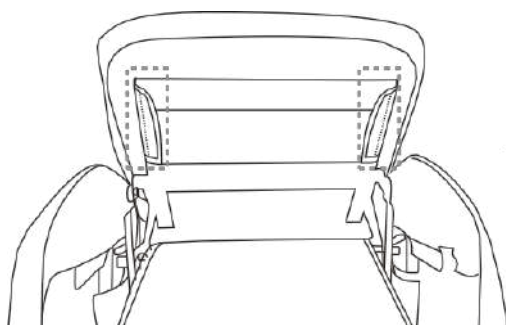


Figuur 3

Opstelling van de massageligstoel

1 Voor gebruik (installatiepositie)

Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor het kantelen van het product.

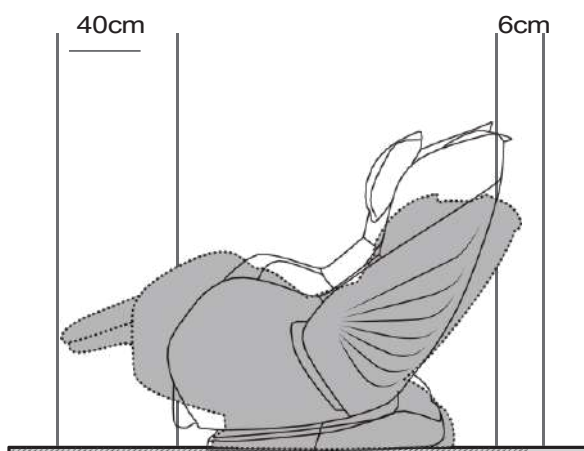

- 0 Stel het product niet bloot aan direct zonlicht of een plek met hoge temperaturen (bijv. voor verwarmingsapparatuur); anders kan het synthetische leer verbleken of hard worden.
- 0 Leg een mat onder het product om vloerbedekking te voorkomen schade. De mat moet het contactoppervlak van het product met de vloer en het contactoppervlak van de voetsteun met de vloer bedekken (minimumafmetingen: 150 x 80 cm). Zie de afbeelding.
- 0 Installeer het product in de buurt van een stopcontact.

2 Stoel Verplaatsen Instructie

Zet de stoel achterover om de chair gemakkelijk door het huis te verplaatsen.



Voordat u de stoel verplaatst, moet u de voetsteun terugzetten in de oorspronkelijke positie.

Anders kan de stoel tijdens het verplaatsen letsel oplopen.

@ Verplaats de massagestoel niet als er iemand op zit.

Het **is aan te raden om** een mat onder de massagestoel te leggen, **omdat het verplaatsen** krassen op de vloer kan achterlaten.

● Th Het product is zwaar en wees voorzichtig bij het verplaatsen.

	Ca. 43kg
Gewicht product	
Leg het product op de vloer.	

Zet het product langzaam en voorzichtig neer om voetsletsel te voorkomen.

Laat de voetsteun pas los als het product horizontaal is geplaatst. Anders veert de voetsteun terug in zijn oorspronkelijke positie.

Het wordt aanbevolen om een voorwerp zoals een mat op de vloer te leggen om beschadiging te voorkomen.



Let op


- Sleep of trek niet aan het product nadat het **geïnstalleerd**.
- Houd het frame niet vast wanneer u het product hanteert. Anders kunnen er productdefecten optreden of kan er persoonlijk letsel ontstaan.
- Verplaats het product niet met katrollen direct op een vloer. Anders kunnen er sporen op de vloer achterblijven.

- Verplaats het product niet als er een persoon op staat. Anders kunnen er ongelukken of verwondingen gebeuren door naar beneden te vallen.
- Houd het voetsmassagegedeelte niet vast wanneer u het product verplaatst. Anders kan er letsel ontstaan door uitglijden.

Voor gebruik


1 Controleer de ruimte rond het product.

Zorg ervoor dat er zich geen persoon, huisdier of ander voorwerp in de buurt van het product bevindt.

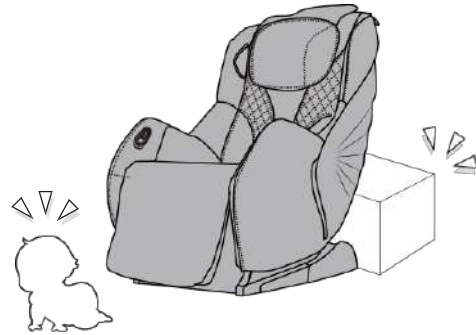

2 Rol het rugkussen op en zet het vast met de rits.

Rol het rugkussen op en bevestig het met de rits aan het hoofdgedeelte.

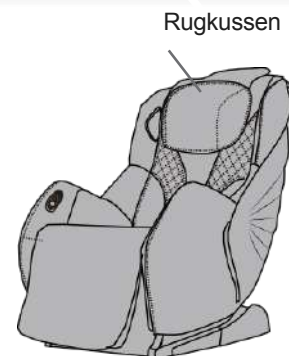


3 Controleer of er geen vreemde stoffen in de naden van het product zitten.

Druk bij het controleren van de onderbeen-/voetmassage de voetsteun met uw handen naar voren en controleer of er geen vreemde voorwerpen in de naad zitten.



Let op


- Steek geen handen, vingers, voeten of hoofd in de naad(en) tussen de voetsteun en het zitvlak of de arMLEUNINGEN.
- Controleer voordat je op het product gaat zitten of er geen vreemde stoffen tussen twee delen zitten.
- Plaats geen huisdieren op het product (zoals de achterkant of de rugleuning).

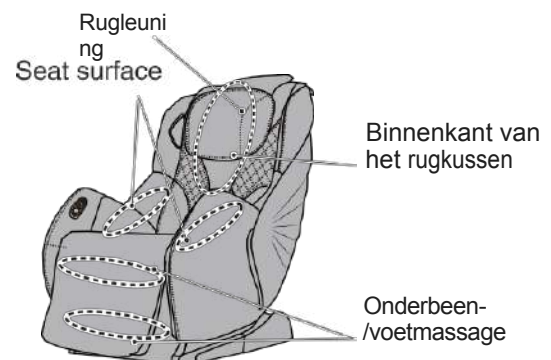

4 Inspecteer de voedingskabel en de stekker


⚠ Waarschuwing

- Verwijder regelmatig vuil zoals stof op de stekker. Anders kan er brand ontstaan door slechte isolatie als gevolg van bijvoorbeeld vocht. (Veeg de stekker af met een droge doek.)
- Beschadig de of de stekker niet. De voedingskabel of stekker niet beschadigen, machinaal bewerken, geforceerd buigen, draaien of verlengen, de of stekker in de buurt van een verwarming plaatsen, of zware voorwerpen aan de voedingskabel of stekker binden of vastbinden. Een beschadigde voedingskabel of stekker kan elektrische schokken, kortsluiting of brand veroorzaken. Raadpleeg de winkel waar u het product hebt gekocht of een erkend servicecentrum over de onderhoudsmethode van de of de stekker.

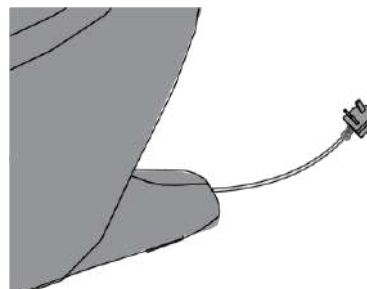


Raak niet verstrikt in de elektriciteitskabel.

Duw de interface in de voedingsingang tot het einde.

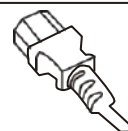


5 Het product inschakelen

- Steek de stekker in het stopcontact.
- Zet de stroomschakelaar in de stand "I".

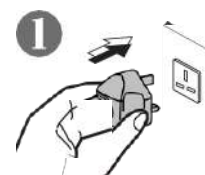


⚠ Waarschuwing

- Steek de stekker tot het einde in het stopcontact. Anders kan dit leiden tot elektrische schokken of brand door oververhitting.
- Houd u strikt aan de voorschriften voor het gebruik van het stopcontact en de bedradingsapparatuur.
¥ Gebruik een 220-240V-,dus/60Hz . (Gebruik het product niet in het buitenland en sluit het niet aan op een transformator zonder **toestemming**). Anders kunnen elektrische schokken, productdefecten of brand ontstaan door te veel eten.
- Steek de stekker niet in het en trek deze er niet uit met natte handen. Anders kan er een elektrische schok ontstaan.

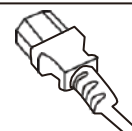

Voor gebruik (vervolg)


6 Controleer of de massagewielen zijn ingetrokken

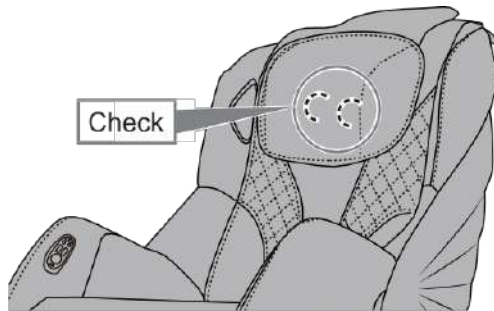

Als dat niet zo is,

druk op ON om ze terug te zetten naar de intrekpositie.

7 Zorg ervoor dat de stof niet beschadigd of gebarsten is.

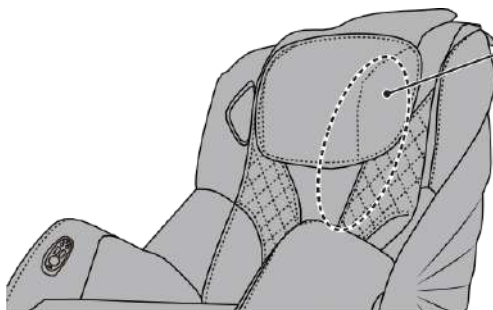


Geïnspecteerd gebied:
De stof van de meelopende delen van de massagewielen
op de rugleuning

Waarschuwing

- Controleer voor gebruik of de stoffen in het gebied dat in de afbeelding wordt aangegeven, beschadigd zijn.
(Zelfs als de stof licht beschadigd is, moet u het product onmiddellijk stoppen, de stekker uit het stopcontact trekken en het product opsturen voor reparatie).
Als het product wordt gebruikt terwijl de stof beschadigd is, kunt u letsel oplopen of een elektrische schok krijgen.

Bedieningsinstructie

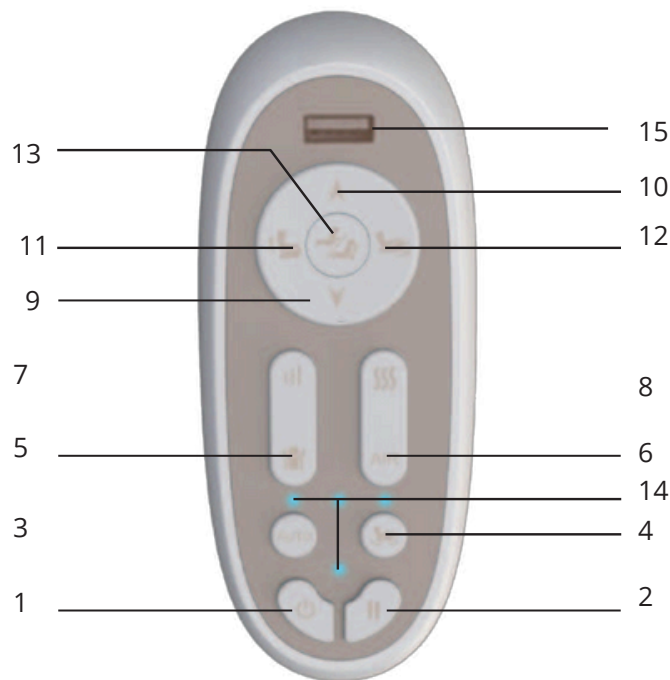

1. AAN/UIT

De aan/uit-knop Druk op de AAN/UIT-knop om de massagestoel in te schakelen. Druk nogmaals op deze knop om alle massagebewegingen te stoppen en de massagestoel terug te zetten in zijn oorspronkelijke positie.

2. Pauze

De pauzeknop Druk op de pauzeknop om de massagefunctie te pauzeren. Op dat moment stoppen alle massagefuncties en wordt ook de timer onderbroken. Druk nogmaals op deze knop om de massage te hervatten. De timer wordt hervat.

3. Autoprogramma

Druk op deze knop om de 6 verschillende programmafuncties te activeren. Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, verandert het programma in de volgende volgorde:

**1.Deep Tissue ; 2.Text Neck ; 3.OFFice PRO ;
4.Film Viewing Mode ; 5.Morning ; 6.Sweet Dreams.**

Telkens wanneer de Auto-toets wordt ingedrukt, zal de stoel automatisch de schouderhoogte opnieuw scannen en de massagerollen terug in de standaard schouderpositie plaatsen. Gebruikers kunnen de rollers nog steeds handmatig in de gewenste positie zetten.

4.Nul-G & Schommeling

Druk op deze knop om de Nul-G-functie te activeren. Telkens deze knop wordt ingedrukt, wijzigt de functie in de volgorde van Nul-G 1> Nul-G 2 in cyclus.
Druk de knop 2 seconden in om de schommelfunctie te activeren. Druk nogmaals 2 seconden op de knop om de functie te stoppen.

5.Manueel programma

Elke keer dat deze knop wordt ingedrukt, verandert de functie in de volgorde van Kneden > Tikken> Klappen & kneden> Shiatsu> Klappen> Rollen> UIT.

6.Airbag

Enmaal indrukken om de airbagfunctie te activeren, nogmaals indrukken om de functie te stoppen.

7.Rol Snelheid/Sterkte/Airdruk

Knop voor aanpassing van rollensnelheid/sterkte/luchtdruk---3 niveaus
Telkens deze knop wordt ingedrukt, wordt de rollensnelheid/-sterkte/luchtdruk achtereenvolgens aangepast naar "Lv1> Lv2> Lv3".

8.Verwarming/Trilling

Elke keer dat deze knop wordt ingedrukt, verandert de functie in de volgorde oF Waist Verwarmen > UIT in cyclus; Druk de knop 2 seconden in om de trilfunctie te activeren. Druk nogmaals 2 seconden op de knop om de functie te stoppen.

9/10.Omhoog/Omlaag

Tijdens de spot- of gedeeltelijke massage kan de gebruiker deze knop ingedrukt houden om omhoog/omlaag te gaan
bewegen in de corresponderende richting. Zodra de massagerollers op de gewenste plek zijn, laat je de knop los en worden de massagerollers vastgezet op de vooringestelde plek.

11/12.Rugleuning Voorover / achterover

Pas de voorover/achterover positie van de stoel aan met deze 2 knoppen. Druk één keer op de knop om de positie aan te passen. Druk nogmaals op de knop om te stoppen zodra de gewenste hoek is bereikt.

13.Spot/gedeeltelijke rugmassage

Met deze knop kan de gebruiker puntmassage selecteren voor elk deel van de rug. Druk één keer op deze knop om de spotmassage op de gewenste plek te activeren. Druk nogmaals op deze knop om over te schakelen naar de gedeeltelijke massagefunctie. Nogmaals indrukken om de functie te stoppen.

14.Functie-indicator

Van links naar rechts: Licht 1; Licht 2; Licht 3; Onderaan: Licht 4

Raadpleeg de tabel Beschrijving indicatorlampjes voor meer informatie over de functie- indicatoren.

15.USB opladen

Zet de stoel aan. Sluit je mobiele apparaat aan via USB om op te laden.

Muziek Functie

Muziek afspelen via mobiel apparaat: Schakel Bluetooth van het mobiele apparaat in en selecteer vervolgens het Bluetooth-apparaat van de massagestoel (OGAWA-OS3161S-XXXXX) om de verbinding succesvol te koppelen. Het wachtwoord voor Bluetooth-verbinding is "9999".

Indicatielampje Beschrijving


Druk op deze knop om de Nul-G-functie te activeren. Telkens deze knop wordt ingedrukt, wijzigt de functie in de volgorde van Nul-G 1 > Nul-G 2 in cyclus.

Druk de knop 2 seconden in om de schommelfunctie te activeren. Druk nogmaals 2 seconden op de knop om de functie te stoppen.

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Functie Licht </div>	Licht 1	Licht 2	Licht 3	Licht 4
OP	UIT	UIT	UIT	UIT
UIT	UIT	UIT	UIT	Aanzetten
PAUZE	UIT	UIT	UIT	Licht knippert
1.Diep weefsel	Aanzetten	UIT	UIT	Aanzetten
2.Tekst Hals	UIT	Aanzetten	UIT	Aanzetten
3.Kantoor PRO	UIT	UIT	Aanzetten	Aanzetten
4.Filmweergavemodus	Aanzetten	UIT	UIT	Aanzetten
5.Ochtend	UIT	Aanzetten	UIT	Aanzetten
6.Zoete droom	UIT	UIT	Aanzetten	Aanzetten
Verwarming AAN (1 flash)	Uitschakelen na 1 flash	Uitschakelen na 1 flash	Uitschakelen na 1 flits	Aanzetten
Verwarming UIT	UIT	UIT	UIT	Aanzetten
Massagesnelheid 1 (1 flash)	Uitschakelen na 1 flash	UIT	UIT	Aanzetten
Massagesnelheid 2 (1 flash)	Uitschakelen na 1 flash	Uitschakelen na 1 flash	UIT	Aanzetten
Massagesnelheid 3 (1 flash)	Uitschakelen na 1 flash	Uitschakelen na 1 flash	Uitschakelen na 1 flits	Aanzetten


Na de massage

Schakel het product uit.

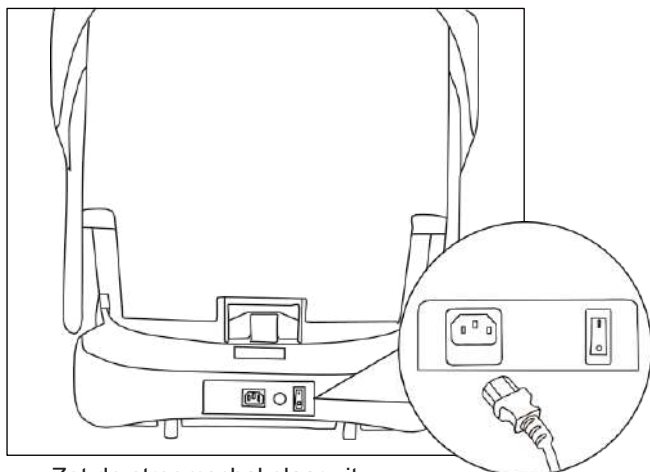

Zet de stroomschakelaar uit.

2 Trek de stekker uit het stopcontact.

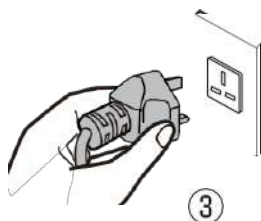

Waarschuwing

- Zet na elk gebruik de aan/uit-schakelaar in de **O-stand en trek de stekker uit het stopcontact**, anders kunnen er ongelukken gebeuren en kunnen kinderen verwondingen oplopen door ermee te spelen.

Timer function

De massage eindigt **automatisch als de tijd** voorbij is.

- De sectie onderbeen-/voetmassage blijft in de eindpositie staan.
- De massagewielen gaan naar de intrekposities.
- De rugleuning gaat niet automatisch omhoog.
Als de controller was uitgeschakeld, druk dan op de AAN/UIT-knop en de rugleuning en voetensteun worden weer ingesteld op origineel.

Reiniging en onderhoud

Cleaning of the synthetic leather

Neem het kunstleer af met een zachte droge doek.

Reinig het product niet met chemicaliën zoals verdunders, benzine en alcohol.

- Volg de gebruiksaanwijzing bij het gebruik van een lederonderhoudsproduct (reinigingsdoek) dat in de handel verkrijgbaar is.

Als het synthetische leer erg vuil is, veeg het dan af met de onderstaande methode.

1 Doe een zachte doek in water of 3% tot 5% neutraal afwasmiddel in heet water en wring het uit.

2 Wrijf het oppervlak van het synthetische leer schoon met de zachte doek.

3 Wrijf het wasmiddel af met een doek die je in schoon water hebt gedrenkt en hebt uitgewrongen.

4 Afvegen met een uitgewrongen zachte doek.

5 Laat het synthetische leer aan de natuurlijke lucht drogen.


Als het moeilijk is om de vlekken op het synthetische leer te verwijderen, week dan stuk melamineschuim dat je op de markt kunt kopen in een neutraal reinigingsmiddel en veeg hiermee het product schoon.

Droog het oppervlak niet met een haardroger.

○ Surface van het synthetische leer kan worden geverfd door stofkleuren; wees daarom voorzichtig wanneer u het product afveegt met denim of gekleurde doek.

○ Keem deze posities uit langdurig contact met kunststoffen om vervaging te voorkomen.

○ Synthetisch leer kan verkleuren, dus de plek die in contact komt met de gebruikte haarverf moet worden afgedekt met een handdoek.

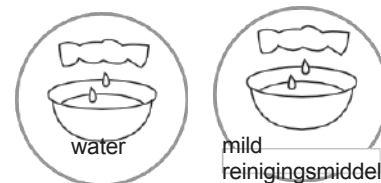

Cleaning of the plastic parts

- 1 Leg een zachte doek in water of neutraal afwasmiddel met heet water, wring hem uit en veeg de plastic onderdelen schoon.



Maak het product niet schoon met chemicaliën zoals verdunner, benzine en alcohol.

- 2 Veeg af met een doekje nadat je het in schoon water hebt gedrenkt

en .

- Wring het doekje uit voordat u het gebruikt om de afstandsbediening af te veegen.

- 3 Laat de plastic onderdelen natuurlijke luchtdroging.

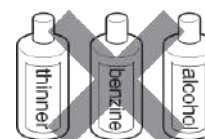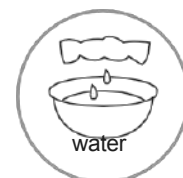

Vragen en antwoorden (V&A)

Q Kunnen personen die **vanwege ziekten vaak naar het ziekenhuis gaan** het product **gebruiken**?

A Deze personen **moeten** een arts raadplegen voordat ze het product gebruiken. Massage is de zogenaamde "drukstimulatie door aanraking": Spieren worden samengedrukt om hun spanning te verlichten en hemokineses te bevorderen. Sommige ziekten kunnen verergeren door massage. Raadpleeg daarom de behandelende artsen voordat u het product gebruikt.

Q Zijn er dingen die **speciaal aandacht tijdens het verhuizen?**

A Let tijdens het verhuizen op de volgende dingen.

Schakel de stroomschakelaar uit en trek de stekker.


Als de originele verpakkingdoos niet beschikbaar is, zorg er dan voor dat de stroomkabel niet op het product is gewikkeld.

en plaats het op de . Zorg er bij het hanteren van het product voor dat de stroomkabel er niet af valt en tegen de grond schuurt.

Als de originele verpakkingdoos niet beschikbaar is, bewaar dan ander verpakkingmateriaal en omwikkel het product ermee om krassen en trillingen tijdens het hanteren te voorkomen.

Q Waar is het **serienummer van het product?**

A Het zit aan de achterkant van het

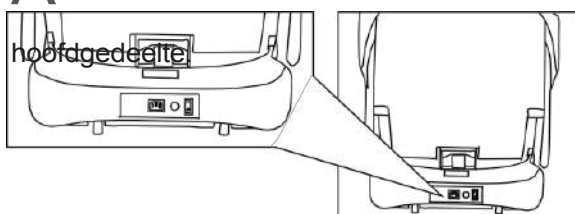

Ik geef om de geluiden het product maakt bij gebruik.

A Dit wordt veroorzaakt door de kernstructuur.

Q Maakt het uit of de massagewielen **verschillende massage-intensiteiten**

A **Dit is niet het geval.** **De rug kan niet zwaar worden belast.** **De rug kan zwaar worden belast.** **De rug kan zwaar worden belast.** Om het meest natuurlijke massage-effect te simuleren, is het product ontworpen met een kernstructuur die afwisselend rugmassage door een linker en rechter mogelijk maakt. Tijdens de massage kunnen de massagewielen iets verschillende posities innemen op de rug. Daarom heb je dat gevoel. Het is geen fout.

Q Hoe zit het met het **maandelijkse stroomverbruik van het product?**

A Stel dat je elke dag 30 minuten masseert in twee keer (15 minuten per keer), dan verbruikt je ongeveer 1,0 kilowattuur per maand.

Problemen oplossen (vervolg)


The sounds and feelings you care about in use of the product

U zult de volgende geluiden of gevoelens horen of hebben wanneer u het product gebruikt. Dit zijn geen abnormale verschijnselen, maar resultaten van de productstructuur.

- Geluid wanneer de stretchmassages zijn ingetrokken
- GSound en gevoel wanneer de massage wielen wrijven patronen op de stof
- GS-geluid van bewegingen zoals kneden en kloppen
- GS-geluid van de draaiende massagewielen
- GS-geluid van omhoog-omlaagbewegingen
- GSeluid van de transportband
- OMotorgeluid
- GSound van de knijpende massagewielen wanneer ze beginnen te stretch
- Geluid wanneer een persoon op de stoel zit
- Wrijvingsgeluid tussen de arMLEUNINGEN en het rugkussen wanneer de rugleuning kantelt
- GFrictiegeluid tussen de massagewielen en de stof
- GS Geluid van de opblaaspomp tijdens Air Bag massage
- GS Geluid van de luchtuitlaat tijdens Air Bag massage
- ORGeluid van het magneetventiel aan de onderkant van het product tijdens Air Bag massage.
- OSwing van de voetsteun
- GSgeluid wanneer de schouders worden gestrekt of bewogen
- @Loopgeluid van de airbags
- GSchuifgeluid van het voetmassagegedeelte
- Wrijvingsgeluid tussen het rugkussen en het leer van de rugbekleding bij het kantelen van de rugleuning

Als het geluid hard is, is het ook mogelijk dat het product defect is.

In dit geval moet u het product laten inspecteren en repareren door een erkend servicecentrum.

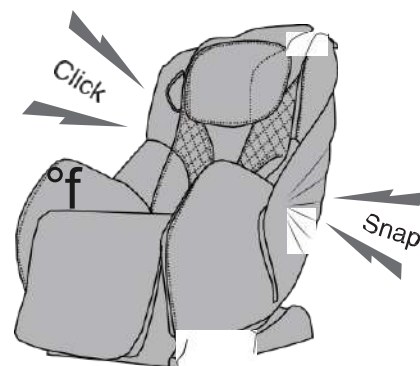

Waarschuwing

- Monteer, demonteer of repareer het **product niet zonder toestemming**. Anders kunnen brand, abnormale bewegingen of persoonlijk letsel ontstaan.

Waarschuwing

- Stop **het product onmiddellijk en trek de stekker uit het stopcontact** in geval van afwijkingen of storingen om rook, brand en elektrische **schokken** te voorkomen.
< Abnormaliteit en storingsvoorbeelden >
 - Het product werkt niet meer nadat de stroomschakelaar in de stand ON is gezet;
 - Nadat de voedingskabel is verplaatst, wordt het product onderbroken ingeschakeld;
 - Tijdens het gebruik verspreidt het product een brandgeur of een abnormaal geluid;
 - Het product is vervormd of verwarmt abnormaal-- Bij een van deze afwijkingen en storingen moet u het product onmiddellijk laten inspecteren en repareren door een erkend servicecentrum.

Problemen oplossen

Nadat er een storing is opgetreden, inspecteert u deze en probeert u de bijbehorende methode hieronder.

Als de storing nog steeds bestaat, neem dan contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht.

Fout	Oorzaak en eliminatie methode
<p>De massagewielen stoppen tijdens gebruik (Het product piept en alle pictogrammen en knoppen op de afstandsbediening knipperen en gaan vervolgens uit).</p>	<p>Voor de veiligheid stoppen de massagewielen eventueel op een te grote externe kracht tijdens het gebruik. Als alle markeringen en knoppen op de afstandsbediening beginnen te flikkeren, is het wijst op een extreme afwijking. Schakel in dit geval de stroomschakelaar uit en ongeveer 10 seconden later weer in. Als de massagewielen weer stoppen, pas dan je zithouding aan en leun niet volledig op de rugleuning. (Gebruikers, vooral diegenen die zwaarder zijn dan 100 kilo, moeten de relevante voorzorgsmaatregelen in acht nemen).</p>
<p>Het product kan niet kantelen of de voetsteun kan niet omhoog of omlaag worden gezet (Het product piept, het controlelampje op de afstandsbediening gaat uit en het product stopt)</p>	<p>Voor de veiligheid stopt het product bij een obstructie of een te grote kracht. Als alle inhoud en knoppen knipperen en de rugleuning of de voetsteun is gestopt, schakelt u de voeding uit en ongeveer 10 seconden later weer in en bedient u het product.</p>
<p>De massagewielen kan de schouders of de nek niet bereiken De linker en rechter massagewielen hebben verschillende hoogtes (intensiteiten)</p>	<p>Als het hoofd niet in contact is met de hoofdsteun of de rug niet in contact is met de rugleuning, zal de schouderpositie in de lichaamstypedetectie mogelijk lager zijn dan de werkelijke positie. Ga in de diepste positie van het product zitten, leun met uw hoofd op de hoofdsteun en begin opnieuw.</p>
<p>Het product kan helemaal niet draaien</p> <ul style="list-style-type: none"> • • 	<p>Dit is geen fout, maar een normaal verschijnsel omdat het product is voorzien van een massagekern die mogelijk maakt om de massagewielen afwisselend te laten werken.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De voedingskabel is losgekoppeld. • De stroomschakelaar is niet . • Er wordt geen programma geselecteerd nadat er op de knop ON op de afstandsbediening is gedrukt.
<p>Het product is beschadigd. De of de stekker heeft een abnormale verwarming.</p>	<p>Neem contact op met een erkend servicecentrum om ongelukken te voorkomen.</p>
<p>Geen warm gevoel</p>	<p>-De verwarmingsknop staat op OFF. -Alleen de stoel op de benen zijn warm. Het warme gevoel is afhankelijk van factoren zoals lichaamstype massagemethode, kleding en kamertemperatuur. Wanneer het voetmassage-gedeelte omhoog wordt gezet, is het warme transferdeel in nauw contact met de voet, waardoor je het warm krijgt. Je kunt je voet bedekken met een deken om het warmer te krijgen.</p>
<p>Het product kan niet afkoelen, zelfs niet als de temperatuurfunctie is uitgeschakeld.</p>	<p>Contacteer service centrum</p>

Als bovenstaande oplossingen niet van toepassing zijn, neem dan contact op met OGAWA service Center.

Specificaties

Stroomvoorziening	AC 220-240V-, 50/60Hz
Stroomverbruik	80W
Bereik van de massagerichting	Ca. 93,5 cm
Bereik links-rechts massagewielen	Afstand tussen de massagewielen (inclusief de massagewielbreedte) tijdens het gebruik van het product Afstand tussen de massagewielen (inclusief de massagewielbreedte) tijdens het rollen op de rug en op en neer bewegen: Ca. 5 cm ~20cm
Snelheid	Kneden: Ca. 23 keer/min. ~ ca. 50 keer/min. Slaan: Ca. 183 keer/min. ~ ca. 386 keer/min. (enkelzijdig) Bewegende snelheid: Ca. 3 cm/s ~ ca. 3,5cm/s
Hellingshoek	Rugleuning: Ongeveer 112°~135° Voetsteun : ca. 10°~92°
Automatisch uitschakelen	Ca. 15 minuten (automatische uitschakeling)
Afmeting staand	Approx.101cmX65cmX100cm
Afmeting liggend	Ca. 133cmX65cmX79cm
Gewicht	43KG
Afmetingen van de verpakking (LXWXH)	Ca. : 128cm*69cm*82cm
Gewicht (inclusief de verpakking)	Ca.: 52,5kg
Maximaal lichaamsgewicht	100 kg

Voor een gebruiker zwaarder dan 100 kilogram kan het product meer geluid maken en kan de stoffen behuizing sneller versleten zijn.